


Kaßla[®]

Flu A/Flu B/PIV IgM 3 en 1 Combo Test

Sangre Entera / Suero / Plasma Combo Test

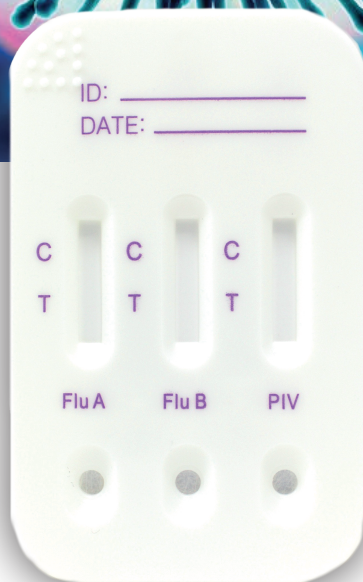


**CERTUM**
DIAGNOSTICS

Acerca de Certum

Certum es una marca que ofrece una amplia gama de kits de pruebas de diagnóstico innovadores que ayudan a brindar respuestas a los profesionales de la salud. Los productos Certum ofrecen precisión, simplicidad y velocidad para el diagnóstico temprano y el monitoreo de afecciones médicas comunes, incluyendo pruebas para la detección de drogas de abuso, embarazo, marcadores cardíacos, marcadores tumorales y pruebas de enfermedades infecciosas entre otros.

Los productos de diagnóstico Certum se usan fuera del cuerpo humano y requieren poco o ningún equipo especial. Certum tiene como misión mejorar el bienestar del paciente, reduciendo los costos y tiempos totales de los resultados de exámenes de diagnóstico, manteniendo la calidad y estándares altos esperados por los profesionales de la salud.

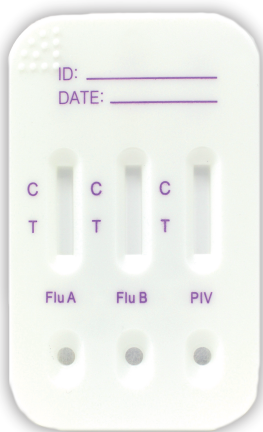

Acerca de la Prueba


Este kit está diseñado para la detección cualitativa de anticuerpos IgM contra Virus de Influenza A/B y Virus de Parainfluenza en suero, plasma o sangre entera humana, como auxiliar en el diagnóstico de la infección por Virus de Influenza A/B y Virus de Parainfluenza.

Los anticuerpos IgM son los primeros en aparecer en la respuesta inmune inicial y por lo general aparecen de 3 a 7 días tras la infección. Si se detectan anticuerpos IgM en la sangre de un paciente, esto indica que la infección es reciente, lo cual es de suma importancia para el diagnóstico de infección aguda por virus de influenza.

Acerca de la Influenza

Como los síntomas del cuadro clínico de diferentes agentes patógenos respiratorios son muy similares, se requiere diagnosticar al agente causante de la infección mediante pruebas de laboratorio.

Puesto que hay una amplia gama de patógenos respiratorios, los cuales suelen ocurrir en co-infección, las pruebas múltiples (en combo) mejoran el tamizaje de patógenos respiratorios y permiten la elección de un tratamiento preciso.

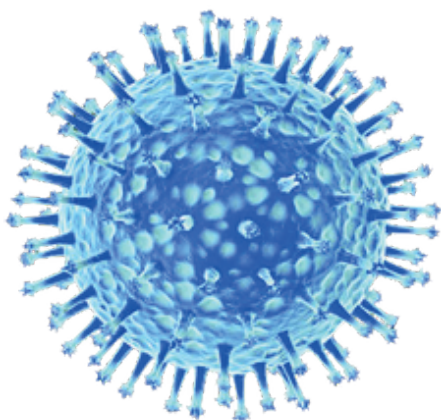

Características



Método Fácil
y Práctico




Resultados
Rápidos



Confiable




Fácil de
Utilizar

- 
- Prueba eficiente, rápida, económica y fácil de utilizar.
 - Alta sensibilidad y especificidad.
 - No requiere equipo de laboratorio adicional.
 - Cuenta con aprobación de SSA en México.
 - No requiere refrigeración.

Modo de Empleo



- 1 Añada 10 μ l de sangre completa o 5 μ l de suero/plasma al pocillo de muestra.

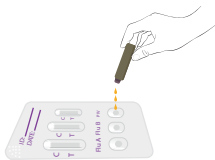


- 2 Añada 90 μ l o 3 gotas de diluyente de muestras al pocillo de muestra.



- 3 Lea los resultados a los 15 - 25 minutos.

Interpretación de Resultados

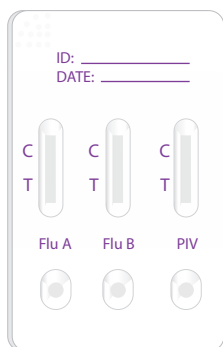

Especificaciones

Agente Infeccioso	Período de Latencia	Características
Influenza A (Flu A)	1 - 7 Días	Pandemia Global
Influenza B (Flu B)	3 - 7 Días	Repentina Contagio rápido Alcanza punto máximo en 2 a 3 semanas Alta frecuencia
Parainfluenza (PIV)	3 - 7 Días	Grupo prioritario : Niños de 1 - 3 años, bebés y neonatos

Información para Pedidos

SKU	Presentación	Contenido
FLU-003	Certum Flu A / Flu B / PIV IgM 3 en 1 k/20	20 pruebas

Registro sanitario: **1828R2018 SSA**

www.kabla.mx



/KablaDiagnostics



/KablaRM



/Kabla



+Kabla

Oficina Monterrey (Matriz)

Loma Blanca 2900 Col. Deportivo Obisepado
Monterrey N.L., C.P. 64040
Teléfono: (81) 4444 1001

Oficina CDMX

Av. Patriotismo #201 Piso 4, Suite 451,
Col. San Pedro de los Pinos, Delegación
Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03800
Teléfono: (55) 9130 0575

Oficina Guadalajara

Bruselas 626, Col. Moderna
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44190
Teléfono: (33) 4040 1449