

iFOB Test - Detección de Sangre Oculta en Heces

Prueba inmunológica para la detección de la presencia de sangre humana oculta en heces rápidamente en un sólo paso.



- No requiere dieta
- Resultados un minuto
- Sensibilidad 50 ng/ml
- Precisión 99.5%

Kaßla
Clinical DX

 Instant-view^{plus}

HECHO EN
USA

DRIVEN FLOW
TECHNOLOGY

Detección de sangre oculta en heces

Prueba inmunológica para la detección de sangre humana oculta en heces rápidamente en un sólo paso.

i-FOB Test

Acerca de Instant-View

La marca Instant-View es sinónimo de alta calidad y prestigio. Usted puede confiar en Instant-View ya que es un producto fabricado en los Estados Unidos por Alfa Scientific Designs, Inc. empresa que mantiene la certificación ISO 13485 para los fabricantes de dispositivos médicos y cada examen ha sido certificado por la FDA y la Comunidad Europea.

Acerca de la Prueba

La prueba de Sangre Oculta en Heces (FOB) iFOB Test de Instant-View es un inmunoensayo altamente específico para detectar la presencia de hemoglobina humana en las heces. Esta prueba rápida brinda grandes ventajas al no requerir que el paciente haga dieta alguna para antes de la toma de muestra.



Driven Flow®

Desarrollo de Pruebas Rápidas Point-of-Care. La tecnología Driven Flow® representa una innovación en el diagnóstico al aumentar la velocidad, precisión y especificidad de las pruebas de flujo lateral, la tecnología patentada Driven Flow® ofrece resultados precisos tan pronto como en un minuto. La Tecnología Driven Flow® cumple con la promesa de "Precisión a la velocidad de ALFA".

Beneficios

- Facilidad de uso y menor probabilidad de errores de procedimiento.
- Analiza y arroja resultados al mismo tiempo.
- Fácil de usar y desechar.
- Listo para usar, sin necesidad de equipo adicional.
- Confiabilidad de los resultados gracias a la integridad funcional de la tira de prueba.
- Sin necesidad de refrigeración o tiempos de espera para el calentamiento de los reactivos. Las pruebas pueden correrse inmediatamente según se necesite.
- Sensibilidad: 50 ng/ml
- Precisión: 99.5%


Modo de Empleo



1.- Retirar el casete de su sobre y colocarlo sobre una superficie plana. Abra la tapa interior.



2.- No intente quitar la tapa del casete.

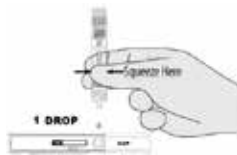

3.- Presionar el tubo de recolección para dispensar una gota de muestra dentro del pocillo.



4.- Cerrar la tapa del dispositivo con fuerza hasta que se detenga para asegurar la reacción.



5.- Leer el resultado entre uno (1) y diez (10) minutos.



Información para Pedidos

Registro Sanitario: 0233R2014 SSA

Catálogo	Producto	Espécimen	Formato
02-7602	iFOB Test	Heces Fecales	Cassette

KABLA DIAGNÓSTICOS

Oficina Monterrey (Matríz)

Teléfono: (81) 4444 1001
Loma Blanca #2900 Col. Deportivo Obisado
Monterrey N.L. C.P. 64040

Oficina Ciudad de México

Teléfono: (55) 9130 0575
Avenida Revolución 356 San Pedro de los Pinos
C.P 03800 4to piso. Ciudad de Mexico

Oficina Guadalajara

Teléfono: (33) 4040 1449
Bruselas #626, Col. Moderna Guadalajara, Jalisco, C.P. 44190
www.kabla.mx